


Patientenkommission/Konfigurations-ID _____

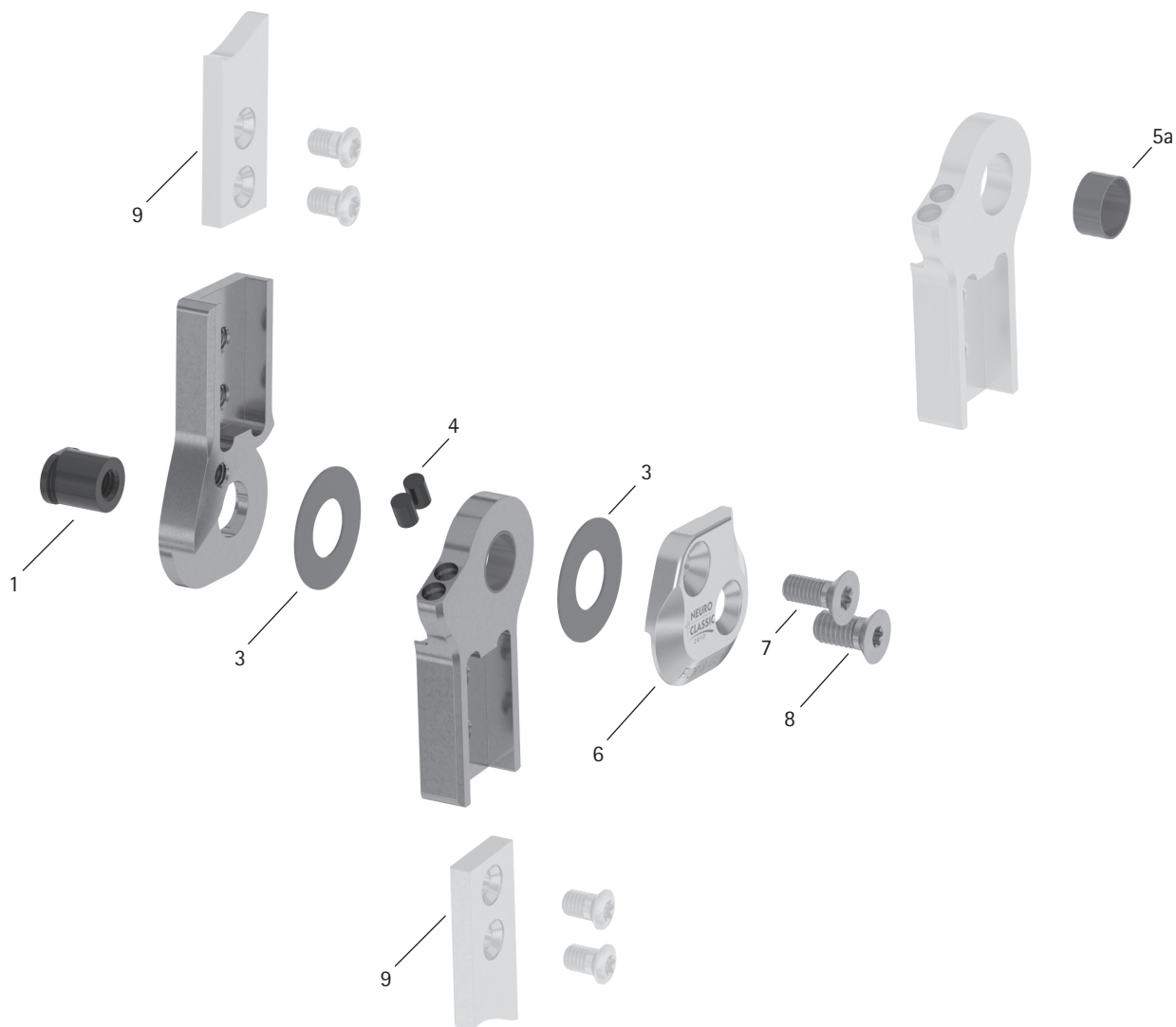

Pos.	14 mm	Bezeichnung	Mögliches Problem	Maßnahme	Überprüfung/ ggf. Austausch	Spätester Austausch nach
Systemgelenk						
1	SB8559-L0630	Splintbolzen	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
3	GS1910-040	Gleitscheibe, Ø = 19 mm	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
3	GS1910-045					
3	GS1910-050					
3	GS1910-055					
3	GS1910-060					
4	PN1000-L05/5	Extensionsanschlagdämpfer	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
5a	BP1110-L050	Gleitbuchse	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
6	SJ0152-L/AL	Deckplatte, links lateral oder rechts medial, Aluminium	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
6	SJ0152-R/AL	Deckplatte, links medial oder rechts lateral, Aluminium				
7	SC1405-L12	Senkschraube mit Innensechsrund	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
8	SC1405-L12	Senkschraube mit Innensechsrund (Achsschraube)			alle 6 Monate	36 Monaten
Systemfußbügel, Systemanker und Systemschienen						
9	siehe Katalog	Systemanker und Systemschienen	Verschleiß oder Bruch	austauschen	alle 6 Monate	-

WP0074-DE-2021-12