
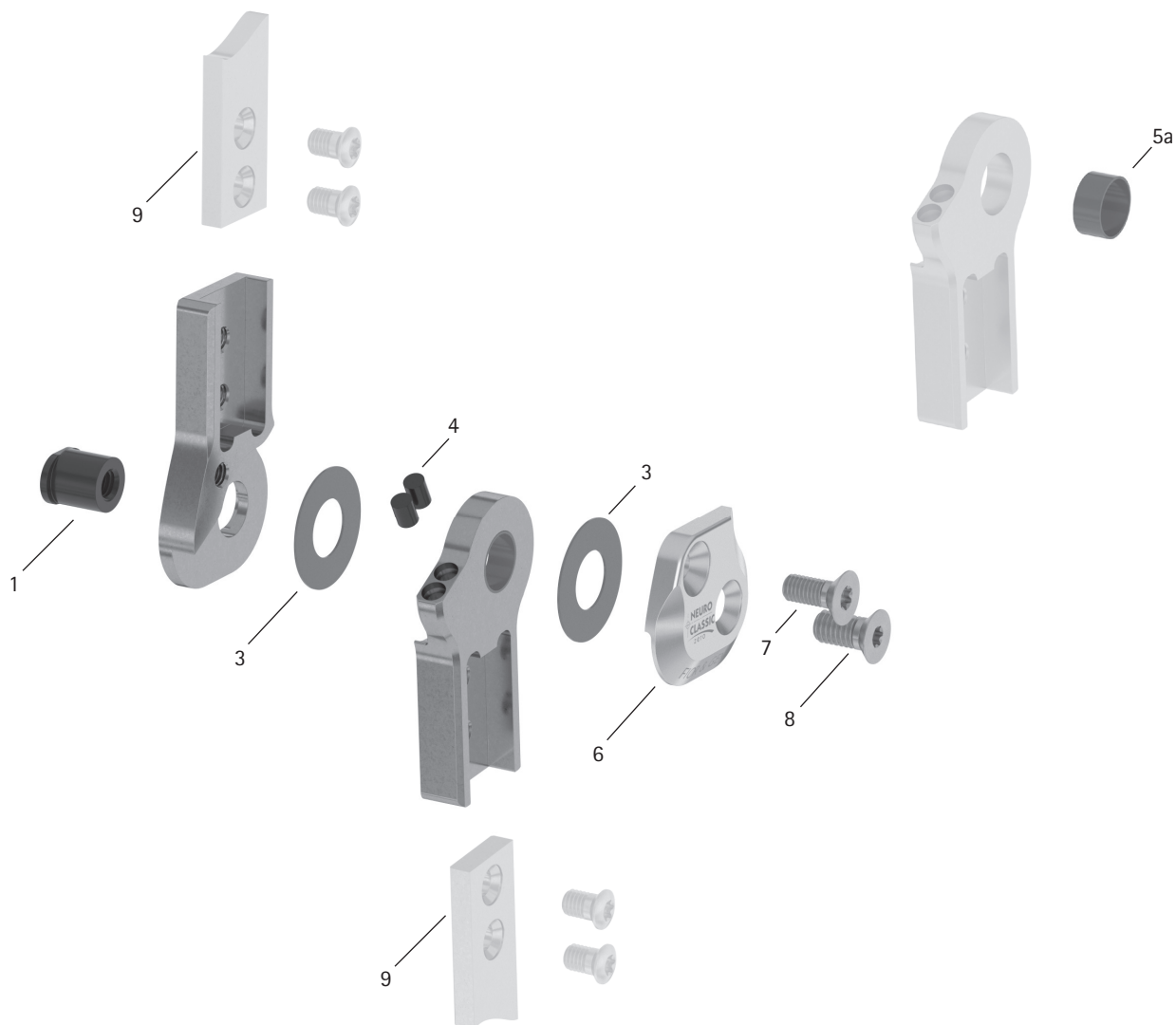


Patientenkommission/Konfigurations-ID \_\_\_\_\_

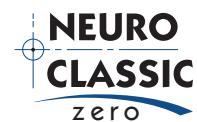

Pos.	16 mm	Bezeichnung	Mögliches Problem	Maßnahme	Überprüfung/ ggf. Austausch	Spätester Austausch nach
<b>Systemgelenk</b>						
1	SB9669-L0760	Splintbolzen	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
3	GS2311-040	Gleitscheibe, Ø = 23 mm	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
3	GS2311-045					
3	GS2311-050					
3	GS2311-055					
3	GS2311-060					
4	PN1000-L05/5	Extensionsanschlagdämpfer	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
5a	BP1211-L055	Gleitbuchse	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
6	SJ0153-L/AL	Deckplatte, links lateral oder rechts medial, Aluminium	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
6	SJ0153-R/AL	Deckplatte, links medial oder rechts lateral, Aluminium				
7	SC1405-L12	Senkschraube mit Innensechsrund	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
8	SC1406-L12	Senkschraube mit Innensechsrund (Achsschraube)			alle 6 Monate	36 Monaten
<b>Systemanker und Systemschienen</b>						
9	siehe Katalog	Systemanker und Systemschienen	Verschleiß oder Bruch	austauschen	alle 6 Monate	-

WP0078-DE-2021-12