


Commission des patients/ID de configuration _____

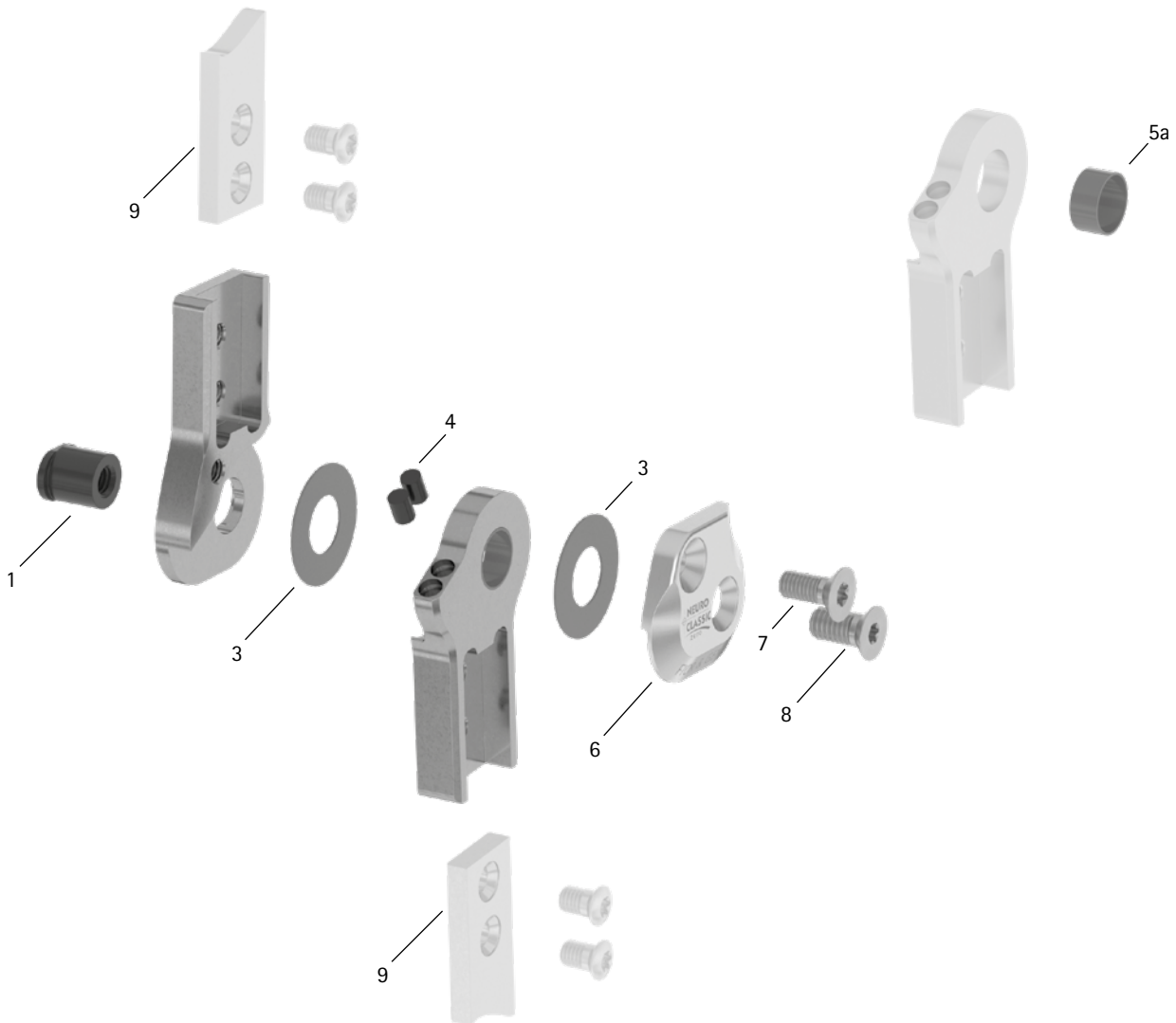

Pos.	16 mm	Désignation	Problème possible	Solution	Contrôle/ remplacement si nécessaire	Remplacement au plus tard
Articulation modulaire						
1	SB9669-L0760	boulon à goupille fendue	usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
3	GS2311-040	rondelle de friction, Ø = 23 mm	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
3	GS2311-045					
3	GS2311-050					
3	GS2311-055					
3	GS2311-060					
4	PN1000-L05/5	amortisseur de la butée d'extension	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
5a	BP1211-L055	douille de guidage	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
6	SJ0153-L/AL	plaque supérieure, latérale gauche ou médiale droite, aluminium	usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
6	SJ0153-R/AL	plaque supérieure, médiale gauche ou latérale droite, aluminium				
7	SC1405-L12	vis à tête fraisée avec empreinte à denture multiple	usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
8	SC1406-L12	vis à tête fraisée avec empreinte à denture multiple (vis axiale)			tous les 6 mois	36 mois
Ancres modulaires et montants modulaires						
9	voir catalogue	ancres modulaires et montants modulaires	usure ou rupture	remplacer	tous les 6 mois	-

WFP0078-FR-2022-06