


Patientenkommission/Konfigurations-ID _____

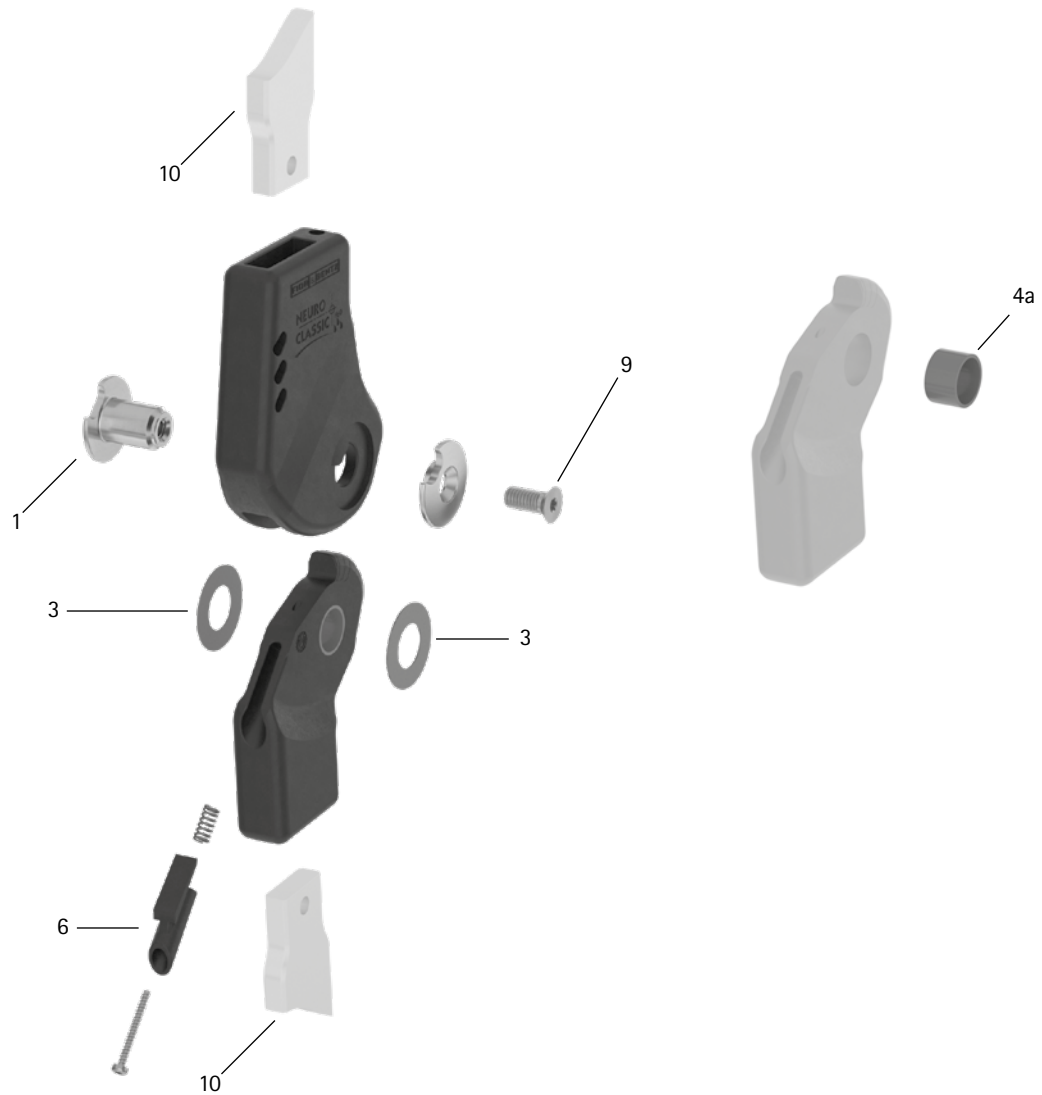

Pos.	14 mm	Bezeichnung	Mögliches Problem	Maßnahme	Überprüfung/ ggf. Austausch	Spätester Austausch nach
Systemgelenk						
1	SK0892-1/C	Splintbolzen	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
3	GS2009-040	Gleitscheibe, Ø = 20 mm	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
3	GS2009-045					
3	GS2009-050					
3	GS2009-055					
3	GS2009-060					
4a	BP1009-L059	Gleitbuchse	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
6	SK9802-E005/C	5° Extensionsanschlag	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	-
9	SC1404-L10	Senkschraube mit Innensechsrund	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
Systemanker und Systemschienen						
10	siehe Katalog	Systemanker und Systemschienen	Verschleiß oder Bruch	austauschen	alle 6 Monate	-

WP0121-DE-2022-05