


Patientenkommission/Konfigurations-ID _____

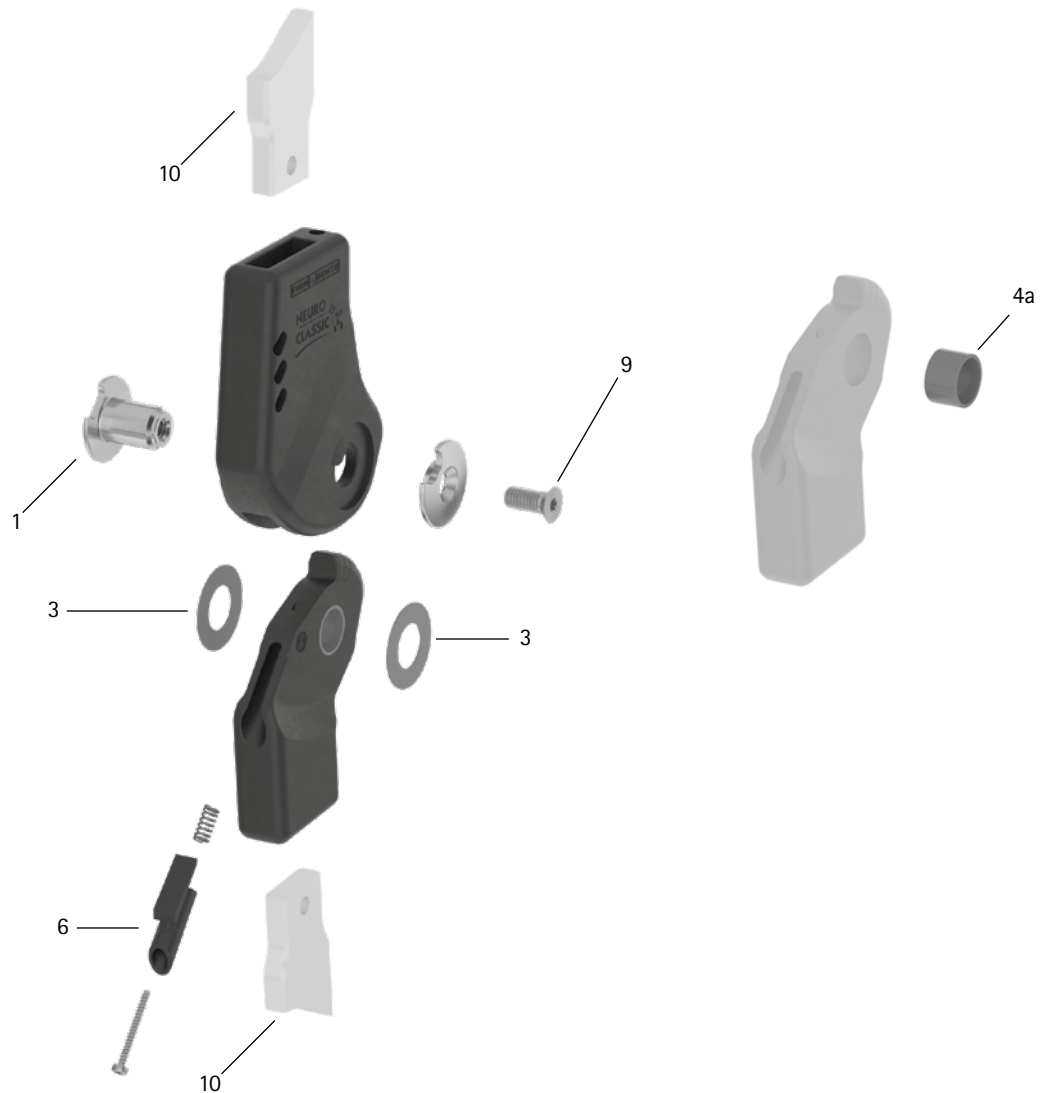

Pos.	16 mm	Bezeichnung	Mögliches Problem	Maßnahme	Überprüfung/ ggf. Austausch	Spätester Austausch nach
Systemgelenk						
1	SK0893-1/C	Splintbolzen	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
3	GS2311-040	Gleitscheibe, Ø = 23 mm	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
3	GS2311-045					
3	GS2311-050					
3	GS2311-055					
3	GS2311-060					
4a	BP1211-L077	Gleitbuchse	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
6	SK9803-E005/C	5° Extensionsanschlag	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	-
9	SC1405-L14	Senkschraube mit Innensechsrund	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
Systemanker und Systemschienen						
10	siehe Katalog	Systemanker und Systemschienen	Verschleiß oder Bruch	austauschen	alle 6 Monate	-

WFO122-DE-2022-05